

SwissTroll® X Patiententisch

Flexibel und bequem



Offerte anfordern

Die Röntgenliegen-Familie ist um ein Mitglied reicher, den Röntgentisch SwissTroll® X One.

Speziell entwickelt für den Gebrauch in Röntgenzimmern ist diese Röntgenliege eine Bereicherung für jede Praxis und jedes Spital. Der besondere Clou ist, dass diese Röntgenliege ein grosses, barrierefreies Röntgenfenster besitzt. Das heisst die Liegefläche besitzt keinen Rahmen und trotzdem ist die Stabilität gewährleistet. Die Höhenverstellung wird mit einem Hand-schalter bedient. Zudem besitzt die Liege einen „Softstart“, das heisst die Motoren fahren sehr sanft an. Für Patienten bedeutet das keine zusätzlichen Schmerzen.

Für ungehinderten Zugang mit dem Röntgenbucky oder dem C-Bogen ist bei der Röntgen- und C-Bogenliege SwissTroll® X One mit der U-förmigen Basis gesorgt. Die grossen Doppellenkrollen sind elektrisch leitend und versprechen eine vorzügliche Manövrierbarkeit der Liege. Genau es platzieren der Liege mit dem Patienten ist so kinderleicht.

SwissTroll® X Patiententisch


Flexibel und bequem

Grosser Höhenverstellbereich von ca. 60-100 cm für bessere Bildgebung eine möglichst nahe Platzierung des Patienten zum C-Bogen-Detektor ist so möglich

165 x 65 cm (LxB) grosses, barrierefreies Röntgenfenster

schnelle und flüsterleise Motoren mit Softstart

sanfte und schmerzverminderte Positionierung des Patienten

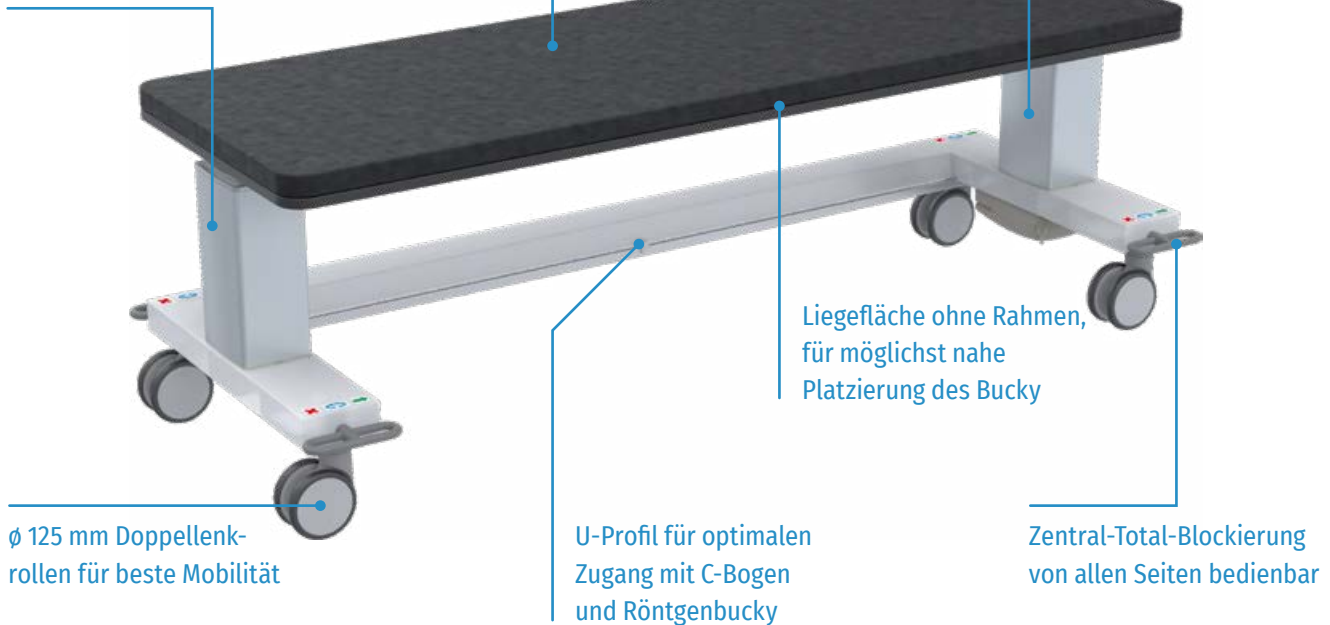

ø 125 mm Doppelenkrollen für beste Mobilität

U-Profil für optimalen Zugang mit C-Bogen und Röntgenbucky

Liegefläche ohne Rahmen, für möglichst nahe Platzierung des Bucky

Zentral-Total-Blockierung von allen Seiten bedienbar

- + höhenverstellbare einteilige, röntgenfähige Liegefläche 195 x 65 cm (LxB)
- + Röntgenfenster 165 x 65 cm (LxB)
- + Auflagematte 4 cm dick, schwarz, Polyesterbezug aus strapazierfähigem, medizinischen Kunstleder
- + Höhenverstellung ca. 60-100 cm mit Softstart
- + Bedienung mittels Handschalter

- + Fahrwerk mit Richtungsfeststeller und Zentral-Total-Blockierung
- + Doppelenkrollen ø 125 mm, elektrisch leitend, Fadenschutz
- + U-förmige Basis für einfachen Zugang mit C-Bogen oder Röntgenbucky
- + max. Tragkraft: 250 kg bei gleichmässig verteilter Last

SwissTroll® X Patiententisch

Flexibel und bequem

3/3

Technisch Daten

Gesamtmasse	221 x 77 cm
Liegefläche	211 x 75 cm
Höhenverstellbereich	60 - 100 cm
Einstellbereich beider Rückenlehnen	0 ° / - 85 °
Trendelenburg-Lagerung	+ / - 15 °
Röntgenfenster	60 x 165 cm
Rollen	Ø 125 mm
Maximale Traglast	250 kg