

AGFA XD 14 Mobil

Kompakt, robust und wireless



Offerte anfordern

Die kompakte Kofferlösung ist eine schnelle Alternative für den mobilen Tierarzt.

- ✓ **Beste Bildqualität**
- ✓ **IP67 Staub- und Wasserfest**
- ✓ **Höchste Belastung**
- ✓ **Akkulaufzeit bis 15 Stunden**

Die Kofferlösung «AGFA XD 14 Mobil» ist eine schnelle und platzsparende Alternative für den mobilen Tierarzt. Der robuste Koffer aus stossfesten Materialien ist durch den ausziehbaren Griff und die integrierten Rollen optimal transportierbar.

Der eingebaute Laptop mit der bewährten Bildverarbeitungssoftware MUSICA3 von AGFA garantiert eine exzellente Bildbefundung vor Ort, denn die Bilder werden innerhalb weniger Sekunden auf der Workstation dargestellt. Das System arbeitet unter nahezu allen Bedingungen perfekt, was ein effizientes Arbeiten garantiert.



AGFA XD 14 Mobil Softwareausstattung

2/4



NX VET von AGFA

- + MUSICA3: automatisiertes Bildprozessing
- + DICOM-Store (automatische Archivierung)
- + DICOM-Print (Ausdruck auf DICOM-Drucker oder via Synedra Viewer auf Windows-Drucker)
- + Patienten-CD erstellen (inkl. Viewer-Software)
- + Tools: Bleibuchstabe, Freitext (z.B. für Chip-/Tätowierungs- oder Zuchtbuchnummer), Auto-Kollimation, Zoom, diverse Vermessungsmöglichkeiten (Strecken, Winkel etc.), Inversdarstellung, Vergleichsaufnahme anzeigen, Rotieren / Spiegeln, Window-Leveling
- + DICOM-Worklist (Arbeitsliste mit Patientendatenübergabe)
- + Veterinär-DICOM-Standard wird eingehalten!

Viewer Synedra


(Beliebige PC-Arbeitsstation in der Praxis)

- + Software kann auf beliebig vielen Stationen installiert werden
- + Gleichzeitige Nutzung auf allen Arbeitsstationen möglich
- + Suchfunktionen: nach Name, Patientennummer, Untersuchungsdatum (bestimmtes Datum, letzte Woche/Monat)
- + umfangreiche Bildbearbeitungs- und Betrachtungsfunktionen



AGFA XD 14 Mobil

Highlights

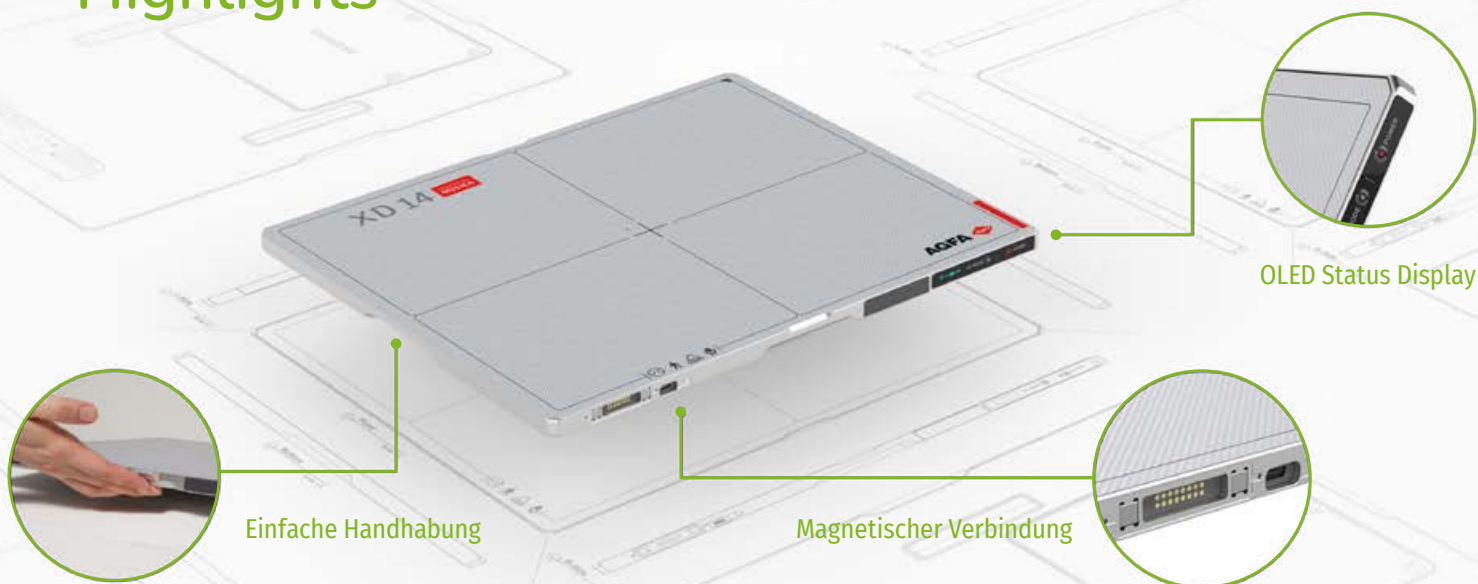

DURA Detektor-Familie

Highlights



Bequemes Laden

CradleCharger,
USB-C Ladefunktion,
Dual BatteryCharger



Höchste Langlebigkeit

Sturzhöhe: 1,0 m



Besserer Transport

Das ergonomische Design
verbessert die Handhabung und
macht das Tragen des Detektors
einfacher sicherer



Temperaturstabilität

Einsatzbereich 0 -40 °C



IP67 Ingression Protection

Bis zu 30 min unter 1 Meter
Wasser



Stabile/Verlässliche AED

(Automatic Exposure Detection)



Langlebige Akkus

Bis zu 15 Stunden Betriebsbereitschaft (16 Stunden um Standby)



Schnelle und stabilere Drahtloskommunikation

IEEE 802.11n/ac(2.4 GHz / 5 GHz), 3
interne Wifi Antennen



AGFA XD 14 Mobil

Kompakt, robust und wireless

4/4

Technische Daten

Laptop	Hersteller	Aktuelles Modell
Transportkoffer	Format	52 x 29,2 x 18,3 cm
	Gewicht	ca. 5 kg inkl. Laptop und Lade- station ohne Panel
	Farbe	schwarz
Detektor XD 14	Abmessung	36 x 43 cm
	Gewicht	2,85 kg (1 Stk. Batterie) 3,15 kg (2 Stk. Batterie)
	Detektortyp	Amorphes Silikon mit TFT: a-Si
	Szintillator	CsJ
	Pixelgrösse	140 µm
	Aktive Pixelmatrix	2560 x 3048 Pixel
	Grauwertumfang	16 bit
	Geometrische Auflösung	Min. 3,5 lp/mm